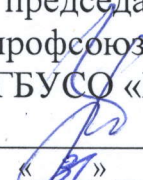


**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КРАЕВОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»**

СОГЛАСОВАНО

председатель первичной
профсоюзной организации
ГБУСО «Краевой ЦСОН»

 /О.А. Бабанская
«07» 07 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора государственного
бюджетного учреждения социального
обслуживания «Краевой центр
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов»
от «31» июля 2025 г. №312-од

Инструкция

**по технике безопасности при работе с аппаратом для дарсонвализации
№ 24**

Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что при работе прибора генерируется очень высокое напряжение, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Использовать для процедур электроды, герметичность которых нарушена.

- Кипятить электроды.

- Самостоятельно ремонтировать прибор.

- Разбирать корпус прибора, как во включенном состоянии, так и после его выключения (ввиду того, что на емкостях используемых в схеме прибора может быть остаточное напряжение опасное для вашей жизни).

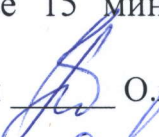
- Во время использования прибора (при проведении процедур) категорически запрещается касаться любых металлических вещей (батареи центрального отопления, водопровод, холодильник, кровать и др.), а так же людей.

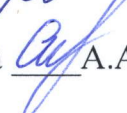
- Установка или смена электродов должна производиться только при выключенном из сети приборе.

- Хранить или пользоваться прибором при температуре более 40 °С.

- В случае использования прибора при температуре ниже 20 °С, прибор перед процедурой следует прогреть, включив его на средней мощности на 1-2 минуты.

- Единовременно пользоваться прибором более 15 минут, в виду исключения его перегрева.

Заведующая социально-оздоровительным отделением  О.А.Бабанская
Заместитель директора,

ответственный за соблюдение требований охраны труда  А.А.Черевичко