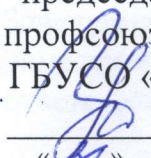


**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КРАЕВОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»**

СОГЛАСОВАНО

председатель первичной
профсоюзной организации
ГБУСО «Краевой ЦСОН»

 /О.А. Бабанская
«31» 07 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора государственного
бюджетного учреждения социального
обслуживания «Краевой центр
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов»
от «31» июля 2025 г. №312-од

**Инструкция
по технике безопасности при работе на аппарате концентратор
кислорода «АРМЕД»
№ 27**

Меры безопасности

Для сохранения установленного заводом срока службы кислородного концентратора не рекомендуется частое включение и выключение аппарата.

Допустимый промежуток времени между включениями должен быть не менее 3 - 5 минут.

В случае попадания смазочного материала или масла в кислородный контур под давлением, может произойти самопроизвольное возгорание. Во избежание этого, необходимо хранить данные вещества вдали от кислородного концентратора и его комплектующих. Не используйте какие-либо смазочные материалы (кроме рекомендованных производителем).

Не эксплуатируйте концентратор во влажных помещениях, в местах возможного попадания воды или какой-либо другой жидкости. Концентратор необходимо расположить в помещении, на расстоянии не менее 2,5 м от таких мест.

Не прикасайтесь к аппарату мокрыми или жирными руками. Концентратор должен использоваться строго в соответствии с предписаниями данной инструкции.

Не используйте запасные части и комплектующие другого производителя.

Использование каких-либо комплектующих и увлажнителя, не предназначенных для данного кислородного концентратора, может привести к ухудшению рабочих характеристик и выходу аппарата из строя.

Не присоединяйте концентратор параллельно или последовательно к группе других кислородных концентраторов для увеличения производительности.

Ремонт концентратора должен производиться квалифицированным специалистом сервисного центра, в противном случае претензии по работе кислородного концентратора не принимаются.

Заведующая социально-оздоровительным отделением _____ О.А.Бабанская
Заместитель директора,
ответственный за соблюдение требований охраны труда _____ А.А.Черевичко