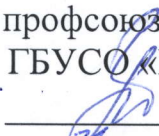


**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КРАЕВОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»**

СОГЛАСОВАНО

председатель первичной
профсоюзной организации
ГБУСО «Краевой ЦСОН»

 /О.А. Бабанская
«»  2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора государственного
бюджетного учреждения социального
обслуживания «Краевой центр
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов»
от «31» июля 2025 г. №312-од

Инструкция

**по технике безопасности при работе на аппарате «ДЭНАС-РЕФЛЕКСО»
№ 34**

Меры безопасности

Выносной электрод для стоп нельзя применять для лечения пациентов, имеющих имплантированные электронные устройства (например, кардиостимулятор), и для пациентов с индивидуальной непереносимостью электрического тока.

Запрещается применять выносной электрод для стоп в области прямой проекции сердца спереди.

Во время стимуляции не следует подключать пациента к какому-либо высокочастотному электрическому прибору, одновременное использование электрода и другого электрооборудования может привести к ожогам и возможному повреждению электрода.

Запрещается подключать электрод к любым другим устройствам, кроме аппаратов динамической электростимуляции серий «ДЭНАС» и «ДиаДЭНС».

Запрещается одновременное подключение двух и более электродов к одному аппарату. Изделие содержит хрупкие элементы.

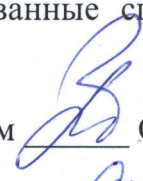
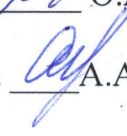
Предохраняйте его от ударов.

Внимание! Если пациент проходит курс другого физиотерапевтического лечения, использование электрода возможно только по согласованию с лечащим врачом.

Запрещается деформировать модуль электростимуляции.

Избегайте длительного нахождения электрода под воздействием прямых солнечных лучей при высокой (>25 °C) температуре воздуха.

Ремонт изделия должны проводить квалифицированные специалисты на предприятии изготовителе.

Заведующая социально-оздоровительным отделением  О.А. Бабанская
Заместитель директора,
ответственный за соблюдение требований охраны труда  А.А. Черевичко